


工作流程 解决方案 保障您的 工作流程

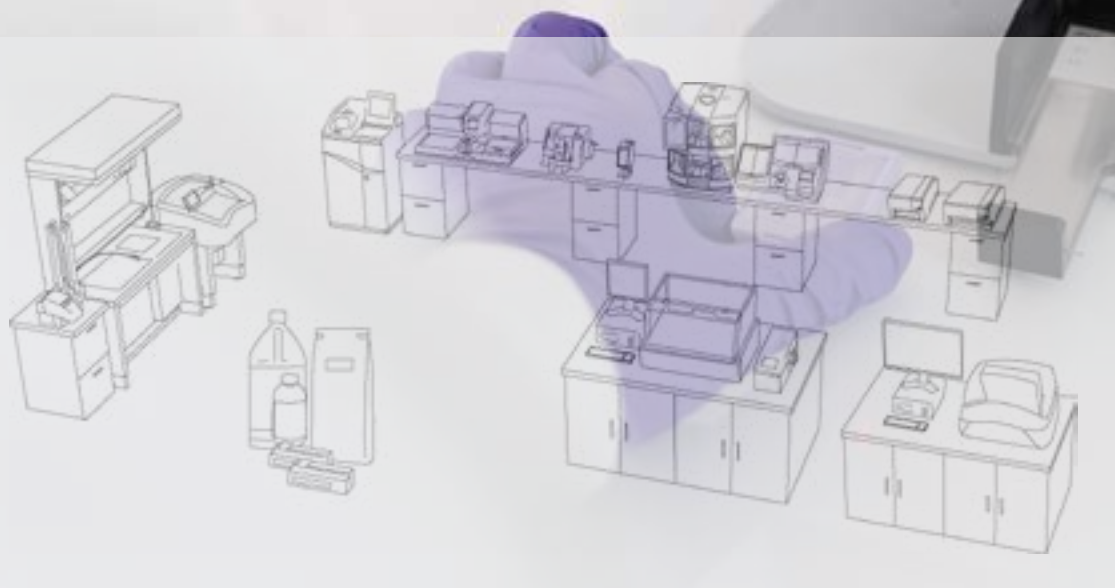

简化并改善您的工作流程

组织学实验室中出现的大部分错误均归因于对包埋盒和玻片进行标记与追踪的方法不当。PrintMate AS™ 包埋盒打印机和 SlideMate AS™ 玻片打印机是第三代标签打印设备，通过配合使用包埋盒和玻片，旨在获得最高准确性，同时简化工作流程和提高效率。

小身材、大作用

- 取材台和切片机旁的按需打印的理想选择，与传统的批量打印相比，错误率更低
- 少至打印一个包埋盒或玻片，避免配对不符
- PrintMate AS 可选的收集系统可以将包埋盒放入存储槽，整理后进行批量打印

可靠的安全性

- 通过一种简单的方法与实验室信息系统进行联接，提供了安全的办法来获取要打印的详细信息
- PrintMate AS 和 SlideMate AS 可用作独立的智能打印机，能够接受条码或键入的数据

全面关怀计划

- 新系列的包埋盒和玻片经过专门设计，与所有 EpreDia 仪器配合使用时可发挥最佳性能，利于建立易于维护的准确工作流程
- 通过全面关怀计划提供延长维保合同，为实验室提供每年两次上门预防性维护访问，以避免由于故障停机而造成时间损失





物理规格

不含包埋盒管的尺寸 (D x W x H):
15 x 17.13 x 11.4 in
(38 x 43.5 x 29 cm)

含包埋盒管的尺寸 (D x W x H):
15 x 17.13 x 31.89 in
(38 x 43.5 x 81 cm)

重量:
37.5 lbs(17 kg), 含盒管

电源要求:
100-240 V, 50-60 Hz

打印规格

输入包埋盒容量:
PrintMate AS 150, 150 个包埋盒;
PrintMate AS 450, 450 个包埋盒;
PrintMate AS 900, 900 个包埋盒
打印介质: 黑色热转印色带
打印介质容量:
1 卷 = 20,000 个包埋盒 (近似值)
打印速度:
每个包埋盒 10 秒 (近似值)

PrintMate AS 包埋盒打印机

精简工作流程、降低实验室错误

- 快速打印可满足取材工作流程
- 高质量的打印意味着每个包埋盒都清晰地标有易于阅读的永久性黑色文字。更准确的样本完整性有助于改善患者护理质量
- PrintMate AS™ 包埋盒打印机体积小巧, 可以轻松安装在取材区域附近, 在为您的实验室确定最佳工作流程解决方案时提供了更大的灵活性
- 包埋盒经过预热, 可实现最佳打印性能
- PrintMate AS 包埋盒打印机可以在任何规模的实验室中用作按需或批量打印机
- 可选的双轨收集系统可收集多达 100 个包埋盒并放入整理器托盘, 这些托盘易于堆叠, 可简化包埋盒与样本容器的匹配过程
- PrintMate AS 包埋盒打印机可使用 EpreDia 的各款 PrintMate 包埋盒

按需打印功能

- 使用标准或自定义配置进行大批量打印, 或打印单个包埋盒
- 利用简单的方法从 LIS 获取数据
- 软件还可以使用申请清单或样本容器上的条码自动打印包埋盒, 从而减少了手动输入数据引起的错误
- 预览窗口可查看将要打印的内容
- 可以提供打印作业的记录, 帮助管理人员和 workflows

遵守法规要求

- 随着包埋盒贴标要求的变化, PrintMate AS 包埋盒打印机可以继续遵守新法规并保持实验室继续符合相关认证要求。

描述	订单号
PrintMate AS 150 包埋盒打印机 (2 个包埋盒料斗)	A83800007
PrintMate AS 450 包埋盒打印机 (6 个包埋盒料斗)	A83800008
PrintMate AS 900 包埋盒打印机 (12 个包埋盒料斗)	A83800009
包括 Printmate AS、USB 线、电源线、2/6/12 个包埋盒料斗、一卷打印色带 (已安装)、Epredia™ LabWriter™ 软件光盘、操作指南、设置和安装指南	

配件	订单号
收集系统 (包括线缆、4 个包埋盒托盘、输出导轨)	A79510014
收集托盘 (4 个一盒)	A79510022
热转印色带 (5 卷一盒)	A79510013
一体式触摸屏电脑	B81300033
数字成像仪 (线性/2D 条码读取器)	B35310050
包埋盒料斗 (单件)	A79510024



分配系统

- 分配系统用于可靠地分配包埋盒



收集托盘

- PrintMate AS 收集系统

全面关怀套餐

PrintMate AS 全面关怀套餐提供了前所未有的工作流程保护。它融合了 PrintMate AS 按需包埋盒打印机、包埋盒以及全面关怀服务支持，提供了一套完整的解决方案。

Epredia 包埋盒

优异的表面光洁度和强化的打印面处理，在配合 PrintMate AS 打印机使用时可获得最优的打印质量。

全面关怀服务支持

PrintMate AS 全面关怀套餐包括三年服务支持，即一年保修和两年延长服务。全面关怀套餐客户每年获得两次上门预防性维护，为期三年。在上门维护期间，磨损的部件会自动换新，以确保运转可靠、工作流程不间断。

您将需要：



包埋盒

包埋盒

全系列包埋盒都经过重新设计,以便在打印期间和实验室流程中具有更出色的性能。

- 优异的表面光洁度和强化的打印面处理,在配合 PrintMate AS 打印机使用时可获得最优的打印质量。
- 全新的 PrintMate AS 兼容管经过精确设计,可减少堵塞并防止停机
- 开合力经过精确调整以兼顾易用性和宝贵样本处理过程中的安全性。
- 所有包埋盒设计都经过了全面的质量验证及可靠性验证,包括打印质量、脱水质量、包埋质量和切片质量
- 新的 12 种颜色可供选择,以提高扫描可靠性



PrintMate 包埋盒

- 孔洞样式:圆孔
- 适合常规样本
- 盖铰链:可反转



PrintMate 条形孔包埋盒

- 孔洞样式:条形孔
- 适合常规样本
- 盖铰链:可反转



Thinline 条形孔包埋盒

- 孔洞样式:条形孔
- 适合常规样本
- 盖铰链:前缘




条形孔包埋盒 2

- 孔洞样式: 条形孔
- 适合常规样本
- 盖铰链: 前缘



TissueLoc™ 包埋盒 (IV 型包埋盒)

- 孔洞样式: 条形孔
- 适合常规样本
- 盖铰链: 后缘
- 大凸片方便打开

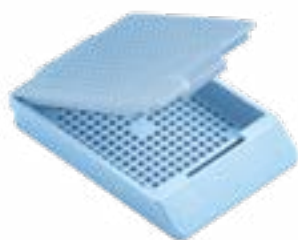

PrintMate 活检包埋盒

- 孔洞样式: 小方形
- 适合活检样本
- 盖铰链: 可反转



Thinline 活检包埋盒

- 孔洞样式: 小方形
- 适合活检样本
- 盖铰链: 前缘



活检包埋盒 2

- 孔洞样式: 小方形
- 适合活检样本
- 盖铰链: 前缘



TissueLoc 活检包埋盒 (IV 型包埋盒)

- 孔洞样式:小方形
- 适合活检样本
- 盖铰链:后缘
- 大凸片方便打开



HistoScreen™ 包埋盒

- 孔洞样式:网状
- 适合非常小的活检样本
- 不再需要海绵或袋子
- 盖铰链:后缘



细孔包埋盒

- 孔洞样式:小孔
- 适合非常小的活检样本
- 盖铰链:前缘

配件	订单号
PrintMate 包埋盒	
1,000 个散装无盖包埋盒 – 使用时加金属盖	B851040
750 个无盖包埋盒, 10 管, 每管 75 个包埋盒 – 使用时加金属盖	B851010
1,000 个散装包埋盒, 附带散装盖	B851070
750 个包埋盒, 10 管, 每管 75 个包埋盒, 随附散装盖	B851100
包埋盒的金属盖*	1001003
PrintMate 条形孔包埋盒	
1,000 个散装包埋盒, 附带散装盖	B851090
750 个包埋盒, 10 管, 每管 75 个包埋盒, 随附散装盖	B851120
Thinline 条形孔包埋盒	
750 个包埋盒, 10 管, 每管 75 个包埋盒, 装有颜色相符的盖子	B851736
条形孔包埋盒 2	
1,000 个散装包埋盒, 装有盖子	B851739
750 个包埋盒, 10 管, 每管 75 个包埋盒, 随附散装盖	B851729
TissueLoc 包埋盒 (IV 型包埋盒)	
1,000 个散装包埋盒, 装有盖子	B851954
750 个包埋盒, 10 管, 每管 75 个包埋盒, 随附散装盖	B851720


*在欧洲、中东和非洲境内不可购买

配件	订单号
PrintMate 活检包埋盒	
1,000 个散装包埋盒, 装有盖子	B851080
750 个包埋盒, 10 管, 每管 75 个包埋盒, 随附散装盖	B851110
Thinline 活检包埋盒	
750 个包埋盒, 10 管, 每管 75 个包埋盒, 装有颜色相符的盖子	B851737
活检包埋盒 2	
1,000 个散装包埋盒, 装有盖子	B851738
750 个包埋盒, 10 管, 每管 75 个包埋盒, 随附散装盖	B851730
TissueLoc 活检包埋盒 (IV 型包埋盒)	
1,000 个散装包埋盒, 装有盖子	B851925
750 个包埋盒, 10 管, 每管 75 个包埋盒, 随附散装盖	B851750
HistoScreen 包埋盒	
1,000 个散装包埋盒, 装有盖子	B851000
750 个包埋盒, 10 管, 每管 75 个包埋盒, 随附散装盖	B851001
细孔包埋盒	
1,000 个散装包埋盒, 装有颜色相符的盖子	B851735
750 个包埋盒, 10 管, 每管 75 个包埋盒, 随附颜色相符的散装盖子	B851734

订购方便。

只需在上方选择包埋盒和配置编号, 然后添加下方的两位色号。

示例: 浅绿色 TissueLoc 活检包埋盒, 带盒管 = B851750LG

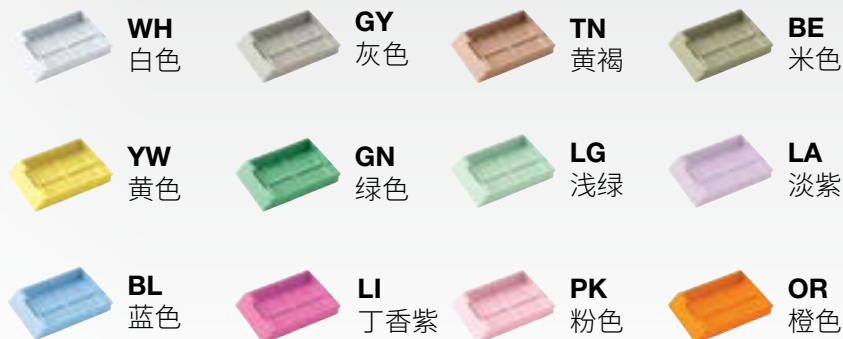



SlideMate AS 玻片打印机

SlideMate AS 按需玻片打印机采用专门为按需打印设计的独特功能,有效提升了单片打印工作流程。

减少样本识别错误

- 和之前的型号相比,占地空间更小,从而更容易安装在切片机的旁边
- 集成式彩色触摸全屏,软件界面直观、简单易用
- 内置条码扫描仪读取包埋盒信息,并将数据导入玻片标签
- 通过分别保存热度设置,轻松优化防脱和非防脱玻片的打印质量

改善精益工作流程

- 轻松连接其他电脑或实验室信息系统
- 直接打印到玻片
- 高质量打印文本、数字和条码(线性和 2D)
- 灵活的数据输入方法,方便集成到实验室工作流程
- 耐化学性的介质可确保打印持久性

连接

- 以太网、Wi-Fi、USB-A (2)、USB-B (1)

物理规格

尺寸:
(D x W x H):
7.9 x 5.5 x 11.6 in
(20 x 14 x 29.5 cm)

重量:
8.3 lbs (3.78 千克)

电源要求:
100-240 VAC, 50-60 Hz, 1.2A

打印规格

打印介质:
黑色热转印色带 (25 mm 宽)
打印介质容量:
1 卷 = 12,000 张玻片 (近似值)
打印速度:
每张玻片 3-5 秒
玻片类型:
1 x 3 in 或 25 x 75 x 1 mm

描述	订单号
SlideMate AS 按需打印系统	A83900005
SlideMate AS 按需打印机配备玻片输送系统、彩色触摸屏、内置扫描仪、Wi-Fi、电源、电源线和高级软件，支持标签创建、特殊面板打印以及从 LIS 导入	

描述	订单号
热转印色带	A83910001
玻片输送系统	A83910002
备用玻片料斗	A83910016
网关软件 (一个单元)	A83910005
多网关软件 (最多十个单元)	A83910009
打印头清洁套件	A83910008

全面关怀套餐

高效性和准确性是当今领先实验室的标志。现在，SlideMate AS 全面关怀套餐提供前所未有的工作流程保护。它融合了 SlideMate AS 按需玻片打印机、显微镜玻片玻片以及全面关怀服务支持，提供了一套完整的解决方案。

Epredia 显微镜玻片

Epredia 显微镜玻片由优质白玻璃制成，并按照高质量标准制造。我们的制造工艺实现的清晰度帮助确保了高水平的透明度，有助于准确的诊断。所有玻片都经过预清洁，轻薄、平坦，有精细的磨砂边并带有一个永久性的标签，用于通过 SlideMate AS 进行打印。

全面关怀服务支持

SlideMate AS 全面关怀套餐包括三年服务支持，即一年保修和两年延长服务。全面关怀套餐客户可获得优先的 24 小时维修周期，并将收到一个永久性的替换设备以减少停机。

您将需要：



显微镜玻片

我们的显微镜玻片由优质白玻璃制成，由我们的瑞士玻璃制造厂按照高质量标准制造。我们的制造工艺实现的清晰度帮助确保了高水平的透明度，有助于准确的诊断。我们经验丰富的玻璃制造者努力创造出每批、每盒质量都始终如一的玻片。完全集成的质量控制措施包括设置多个测试检查点，以确保提供实验室用的高质量产品。所有玻片都经过预清洁，轻薄、平坦，有精细的磨砂边。每包产品都精心包装以防湿、防潮。有关更多信息，请联系当地销售代表。

Superfrost 和 Colorfrost 玻片

- Superfrost 和 Colorfrost™ 玻片具有耐用，且易于书写、打印和具有印制标签的丝印面
- 印制标签不受几乎所有常见实验室化学品和试剂的影响
- 提供多种颜色以方便识别

专业印制玻片

- 将细胞定位在玻片表面上易于识别的区域
- 加样孔的周围采用耐化学性和防水的疏水油墨罩
- 提供 1、3、8、10 和 12 孔配置

Polysine 防脱玻片

- 粘合剂涂层将石蜡包埋的切片吸附到玻片表面
- Polysine 玻片涂有多聚赖氨酸化学衍生物
- 具有耐用，且易于书写、打印和阅读的白色丝印面
- 白色丝印面不受几乎所有常见实验室化学品和试剂的影响

Superfrost Excell 防脱玻片

- Superfrost Excell 防脱玻片具有独特的强粘性化学成分
- 可用于涉及高 pH 热诱导抗原修复 (HIER) 的应用
- 具有耐用, 且易于书写、打印和阅读的白色丝印面
- 印制标签不受几乎所有常见实验室化学品和试剂的影响

Superfrost Plus Gold 防脱玻片

- Superfrost Plus Gold 防脱玻片采用复杂的粘合技术制成, 可吸附新鲜的组织切片或福尔马林固定的冷冻组织切片并化学键合到玻片表面
- 推荐用于难以固定的组织样本, 例如骨骼、大脑、乳房和皮肤
- 具有耐用, 且易于书写、打印和阅读的白色丝印面
- 印制标签不受几乎所有常见实验室化学品和试剂的影响

SuperFrost Plus 和 ColorFrost Plus 防脱玻片

- SuperFrost™ Plus 和 ColorFrost Plus 防脱玻片设计成不需要实验室涂覆的涂层帮助, 即可固定组织切片
- 玻片可固定冷冻和福尔马林固定、石蜡包埋的组织切片以及细胞学制备
- 每个玻片都具有硅烷基化学成分, 但经过优化可提高应用性能
- 具有耐用, 且易于书写、打印和阅读的丝印面
- 印制标签不受几乎所有常见实验室化学品和试剂的影响
- 提供多种颜色以方便识别



记号笔



钻石笔尖记号笔

- 在玻璃上书写的文字不可擦除
- 安装在铝制笔中
- 5” (12.7 cm)

Richard-Allan Scientific 组织切片粘合剂

Richard-Allan Scientific 组织切片粘合剂为预混合、即用型，不会干扰染色反应。

- 在水浴条件下使用，以增加组织对玻片的亲和力
- 无背景残留
- 加热技术可提高附着力

描述	订单号
钻石笔尖记号笔	750
Richard-Allan Scientific 组织切片粘合剂	86014