

Cytoslides de Shandon

Características generales

- El área de la muestra se esboza para una ubicación rápida durante el examen.
- Están elaborados de vidrio blanco fino fabricado con altos estándares de calidad.
- Los portaobjetos se limpian previamente, son delgados y planos, y presentan bordes finamente rectificadas.

Cytoslides revestidos


- Elimine la necesidad de procedimientos de revestimiento de albúmina.
- Ahorre tiempo de trabajo y recursos.
- Los Cytoslides de adhesión revestidos están diseñados para proteger las preparaciones citológicas.
- El revestimiento presenta una sustancia química basada en silano.

Comuníquese con su representante de ventas para obtener más información.

Shandon Single Cytoslides


- Mejore el procesamiento y la visualización de muestras de pequeño volumen con Shandon™ Single Cytoslides™, para usar con EZ Single Cytofunnels.
- Los portaobjetos cuentan con una pestaña blanca y un anillo de 13 mm de diámetro que define el área de visualización de la célula para permitir una ubicación eficiente y rápida.
- Los Cytoslides individuales con anillo de 13 mm sin revestimiento están disponibles con el anillo en la parte delantera o posterior del portaobjetos.
- Los Cytoslides individuales con anillo de 13 mm con revestimiento están disponibles con el anillo solo en la parte posterior del portaobjetos.



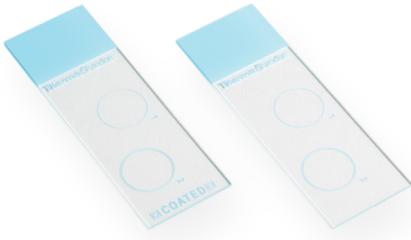

Shandon Double Cytoslides

- Utilice Shandon™ Double Cytoslides™ con cámaras EZ Double Cytofunnel.
- Los portaobjetos cuentan con una pestaña azul y dos anillos de 13 mm de diámetro azules que definen el área de visualización de la célula para permitir una ubicación eficiente y rápida.
- Cada muestra se visualiza dentro de un anillo numerado como 1 o 2 que corresponde con la cámara del Cytofunnel.
- Los Cytoslides con anillos dobles de 13 mm con y sin revestimiento están disponibles con los anillos solo en la parte posterior del portaobjetos.

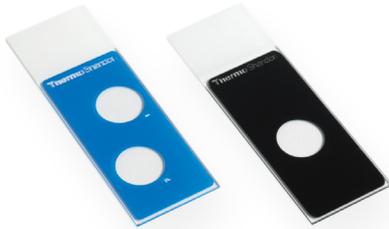

Shandon Mask Cytoslides

- Enmascare la luz UV para restringir la visualización del microscopio a la muestra con Shandon™ Mask Cytoslides™.
- Los Shandon Mask Cytoslides se usan para inmunofluorescencia y poseen pestañas blancas.
- Single Mask Cytoslide posee una máscara negra impresa en la parte delantera del portaobjetos con un pocillo de 13 mm.
- Double Mask Cytoslide posee una máscara azul impresa en la parte delantera del portaobjetos con dos pocillos numerados de 13 mm.