

# Chambres à échantillons Shandon EZ Cytofunnel

## Caractéristiques générales de l'EZ Cytofunnel™

- À usage unique avec toutes les applications de cytocentrifugeuse Cytospin d'Epredia
- Optimise le rendement au niveau des cellules
- Produit des préparations en couches minces économiques
- Réduit les risques liés à l'exposition aux échantillons pathogènes
- Jetable pour économiser le temps de décontamination et de nettoyage
- Diminue la possibilité de contamination croisée
- Ne nécessite pas de clip métallique à lame Shandon™ Cytoclips™



### Shandon EZ Cytofunnel simple avec cartes filtres blanches

L'EZ Cytofunnel™ simple de Shandon™ est une chambre à échantillons jetable avec carte filtre blanche et bouchon. Conçu pour une capacité d'absorption élevée.

- Utilisé pour des volumes d'échantillons de 0,1 à 0,5 ml
- Zone de dépôt de cellules de 6 mm de diamètre (28 mm<sup>2</sup>)
- Carte filtre blanche pré-fixée pour une capacité d'absorption élevée

Quantité	Numéro de commande
40/boîte	A78710003
200/caisse	A78710020



### Shandon EZ Cytofunnel simple avec cartes filtres marron

L'EZ Cytofunnel simple de Shandon est une chambre à échantillons jetable avec carte filtre marron et bouchon. Conçu pour une absorption plus lente.

- Utilisé pour des volumes d'échantillons de 0,1 à 0,4 ml
- Zone de dépôt de cellules de 6 mm de diamètre (28 mm<sup>2</sup>)
- Carte filtre marron pré-fixée pour une absorption plus lente ; augmente le rendement au niveau des cellules
- Idéal pour les échantillons hypocellulaires tels que le liquide céphalo-rachidien

Quantité	Numéro de commande
40/boîte	A78710004


### Shandon Cytofunnel double EZ

L'EZ Cytofunnel™ double de Shandon™ est une chambre à échantillons jetable avec carte filtre blanche et bouchon.



- Utilisé pour des volumes d'échantillons de 0,05 à 0,25 ml par chambre
- Possède deux zones de dépôt d'échantillons sur une seule lame; chaque zone mesure 6 mm de diamètre (28 mm<sup>2</sup>)
- Doublez le nombre de présentation d'échantillon par série
- Les marquages sur l'entonnoir correspondent aux marquages des lames pour une identification simple
- Carte filtre blanche pré-fixée pour une capacité d'absorption élevée
- Idéal pour une utilisation avec des techniques d'immunochimie

Quantité	Numéro de commande
40/boîte	A78710005
200/caisse	A78710021

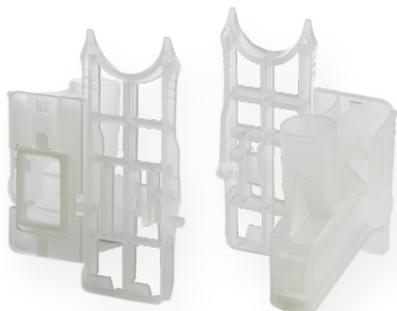

## Shandon EZ Megafunnel avec bouchon et lame

L'EZ Megafunnel™ de Shandon™ est une chambre à échantillons jetable grand volume avec bouchon.

- Conçu pour la centrifugation d'échantillons de grande taille, de 0,5 à 6 ml
- Zone de dépôt des cellules de 22 x 14,75 mm (325 mm<sup>2</sup>) pour un rendement accru au niveau des cellules
- Réduit la nécessité de pré-centrifugation
- Prépare à la fois des échantillons séchés à l'air et fixés, ce qui apporte de précieuses informations de diagnostic supplémentaires

Quantité	Numéro de commande
25/boîte	A78710001