


Klingenhalter



Einwegklingenhalter E für HM 355S, HM 340E und HM 325

- Mit Schnellklemmsystem für Klingen mit hohem und niedrigem Profil, Freiwinkleinstellung
- Der bewegliche Klingenschutz mit Skala deckt die gesamte Klinge in jeder Position ab.

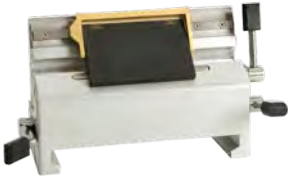

Einwegklingenhalter ER für HM 355S, HM 340E und HM 325

- Mit Schnellklemmsystem für Klingen mit hohem und niedrigem Profil, Freiwinkleinstellung
- Die Klemmplatte bewegt sich seitlich, um die Klinge zu bewegen, ohne dass die Klemme gelöst werden muss.
- Zum Schneiden von Makro-/SuperMega-Kassetten (vertikal)
- Der bewegliche Klingenschutz deckt die gesamte Klinge in jeder Position ab.
- Abnehmbarer Hebel für die Schnittwinkleinstellung

Standard-Stahlmesserhalter N für HM 355S, HM 340E, HM 325

- Mit integriertem Klingenschutz und Freiwinkleinstellung
- Die Klingenhöhe kann mittels einer Führung eingestellt werden.
- Abnehmbarer Hebel für die Schnittwinkleinstellung

Standard-Stahlmesserhalter C für HM 355S, HM 340E, HM 325

- Stabile Version zur Verwendung mit Wolframcarbide messern und herkömmlichen Klingen
- Die zentrale Klemmplatte bietet optimale Stabilität, wo die Schnittkräfte am höchsten sind.
- Ermöglicht die Nutzung der gesamten Klingenlänge und Freiwinkleinstellung
- Abnehmbarer Hebel für die Schnittwinkleinstellung

Beschreibung	Bestellnummer
Einwegklingenhalter E für HM 355S, HM 340E, HM 325	705800
Einwegklingenhalter ER für HM 355S, HM 340E, HM 325	705830
Standard-Stahlmesserhalter N für HM 355S, HM 340E, HM 325	705820
Standard-Stahlmesserhalter C für HM 355S, HM 340E, HM 325	705810