



Impresión limpia Resultados nítidos

Portaobjetos SlideMate y portaobjetos con adhesión SlideMate Plus de Epredia

Disfrute de una impresión limpia y nítida con los portaobjetos para microscopio SlideMate™ de Epredia, diseñados para la impresora de portaobjetos SlideMate AS*. Los portaobjetos SlideMate unidos a la impresora de portaobjetos SlideMate AS, ayudan a reducir los problemas de identificación comunes en las etiquetas escritas a mano.




Portaobjetos para microscopio SlideMate

- Banda blanca y suave de 19 mm, validada para funcionar con la impresora de portaobjetos SlideMate AS
- La banda es impermeable a prácticamente todos los compuestos químicos y reactivos comunes de los laboratorios
- Disponible en formato con y sin adhesión. Los portaobjetos con adhesión SlideMate Plus cuentan con un recubrimiento adhesivo para aplicaciones clínicas rutinarias
- Nuestros portaobjetos para microscopio están hechos de vidrio extrablanco, fabricado atendiendo a los estándares de calidad más elevados en nuestro centro de fabricación de Suiza. La nitidez conseguida por nuestro proceso de fabricación ayuda a garantizar los altos niveles de transparencia que facilitan realizar diagnósticos precisos
- Los portaobjetos se suministran prelavados, finos, planos y con los bordes pulidos. Cada paquete está envuelto para protegerlos de la humedad
- Todos los portaobjetos SlideMate se fabrican con vidrio suizo en EE. UU.

*Los portaobjetos SlideMate se han validado para su uso con la SlideMate AS. Es necesaria la validación por parte del cliente para su uso con otros sistemas de impresión por transferencia térmica.

**Nota: Puede que sea necesario bajar la configuración de calor de las impresoras SlideMate AS cuando se usen con los portaobjetos SlideMate, en comparación con la configuración de calor al usar la impresora SlideMate AS con portaobjetos Superfrost. Cada impresora SlideMate AS debe optimizarse individualmente.

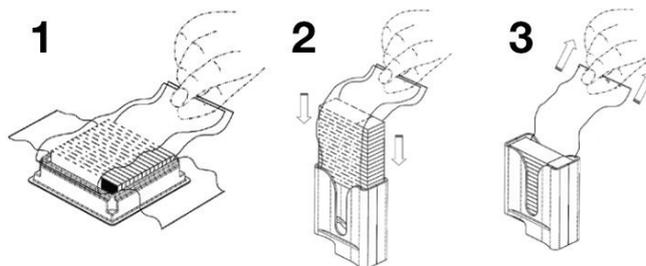

Los portaobjetos se embalan con un envoltorio interior especial para ayudar a cargarlos en la SlideMate AS y evitar la contaminación durante su manipulación.

Portaobjetos de microscopio SlideMate

- Banda blanca, 25 x 75 x 1 mm, bordes pulidos, cantos de 90° TT-40418217-W
- 72 unidades por paquete, 20 paquetes por caja

Portaobjetos con adhesión para microscopio SlideMate Plus

- Banda blanca, 25 x 75 x 1 mm, bordes pulidos, cantos de 90° TT-40418218-PS-W
- 72 unidades por paquete, 20 paquetes por caja

Impresora de transferencia térmica para portaobjetos SlideMate AS

La impresora SlideMate AS está diseñada para mejorar la eficiencia de los flujos de trabajo gracias a una pantalla táctil totalmente integrada y un software sencillo. Los lectores de códigos de barras incorporados leen la información de la bandeja e importan los datos a la etiqueta del portaobjetos, imprimiéndolos directamente en el portaobjetos SlideMate.



SlideMate AS Basic Printer	A83900001
SlideMate AS Basic Printing System	A83900002
SlideMate AS On-Demand Printer	A83900004
SlideMate AS On-Demand Printing System	A83900005

New Erie Scientific LLC
(Asia-Pacífico, América Latina)
20 Post Road
Portsmouth, NH 03801
ESTADOS UNIDOS
Tel.: +1 (800) 258-0834 | +1 603 431 8410

Epredia (Europa)
Essendonk 30 | 4824 DA Breda
PAÍSES BAJOS
Alemania: sales.de@epredia.com
Benelux: sales.bnl@epredia.com
RU: sales.uk@epredia.com

Descubra más en [epredia.com](https://www.epredia.com)

© 2020 Epredia Group. Reservados todos los derechos. Todas las marcas comerciales son propiedad de Epredia y sus subsidiarias salvo que se especifique lo contrario. Estos productos no están disponibles en todas las regiones. Póngase en contacto con el representante de ventas local de Epredia para obtener más información. **M20135_ES 102020**

epredia Enhancing precision cancer diagnostics

POWERED BY SHANDON MICRON MENZEL-BLASEL