

打印干净 结果清晰

Epredia SlideMate 载玻片和 SlideMate Plus 粘附型载玻片

使用 Epredia SlideMate™ 显微镜载玻片体验清晰、干净的打印，这款载玻片是专为 SlideMate AS 玻片打印机设计的*。与 SlideMate AS 玻片打印机搭配使用时，SlideMate 载玻片可以减少手写标签存在的识别问题。




SlideMate 显微镜载玻片

- 光滑 19毫米 白色丝印面，可与 SlideMate AS 载玻片打印机配合使用
- 丝印面几乎不受任何常见实验室化学品和试剂的腐蚀
- 提供粘附型与非粘附型载玻片。SlideMate Plus 粘附型载玻片拥有粘附涂层，适用于常规的临床应用
- 我们的显微镜载玻片由超白玻璃制成，符合瑞士产地的高品质标准。生产工艺所达到的清晰度可以保证很高的透明度，从而有助于准确诊断
- 载玻片拥有预清洁、超薄、平整的特点，以及精致的磨砂边 – 每个包装都防湿防潮
- 所有 SlideMate 载玻片均在美国使用瑞士玻璃制成

*SlideMate 载玻片经验证可以与 SlideMate AS 搭配使用。与其他热转印打印系统搭配使用时，客户需要进行验证。

**注释：与 SlideMate 载玻片搭配使用时，SlideMate AS 打印机的温度值设定可能会比与 Superfrost 载玻片搭配使用时有所降低。每台 SlideMate AS 打印机都应单独进行设置优化。

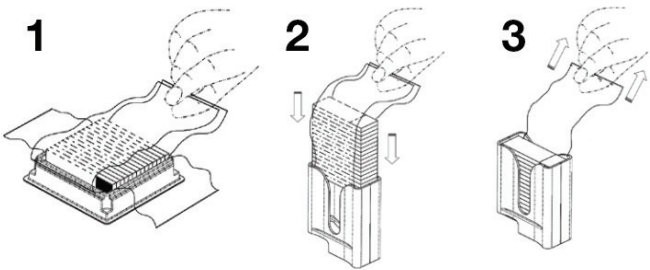

载玻片采用特殊的内包装，可帮助将其装载到 SlideMate AS 上载槽，从而避免因手工接触而受到污染。

SlideMate 显微镜载玻片

- 白色丝印面，25 x 75 x 1 mm，磨砂边，90° 角
- 72 片/包，20 包/箱

TT-40418217-W

SlideMate Plus 粘附型显微镜载玻片

- 白色丝印面，25 x 75 x 1 mm，磨砂边，90° 角
- 72 片/包，20 包/箱

TT-40418218-PS-W

SlideMate AS 热转印玻片打印机

SlideMate AS 通过完全集成的触摸屏和简单的软件增强了精益工作流程。内置的条形码扫描仪可以读取包埋盒信息，并将数据导入到载玻片标签，然后直接在 SlideMate 载玻片上将其打印出来。



SlideMate AS Basic Printer	A83900001
SlideMate AS Basic Printing System	A83900002
SlideMate AS On-Demand Printer	A83900004
SlideMate AS On-Demand Printing System	A83900005

New Erie Scientific LLC
(亚太地区，拉丁美洲)
20 Post Road
朴茨茅斯，NH 03801
美国
电话：+1 (800) 258-0834 | +1 603 431 8410

欲了解更多信息，请访问 [epredia.com](https://www.epredia.com)

© 2020 Epredia Group. 保留所有权利。除非另有说明，全部商标为 Epredia 及其子公司所有。这些产品并非适用于所有地区。请联系您当地的 Epredia 销售代表获取更多信息。M20135_EU 092020

epredia Enhancing precision cancer diagnostics

POWERED BY SHANDON MICRON MENZL-GLASER